

## INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH CZERWONE ŚWIATŁO LED - PAS LED

### Wystawiający:

HHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Stanisława Klimeckiego 8/75  
30-705 Kraków  
kontakt@zdrowinalata.pl

### UWAGI OGÓLNE I OSTRZEŻENIA

Urządzenie – pas LED – jest wyrobem elektrycznym przeznaczonym do miejscowej ekspozycji skóry i tkanek na światło czerwone i bliską podczerwień.






Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.

Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.



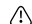



Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do podrażnień skóry, przegrzania, dyskomfortu lub zagrożeń elektrycznych.

Urządzenia przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o normalnej wilgotności i temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C, o ile producent danego modelu nie określił inaczej.

### SYMBOLE OSTRZEGAWCZE STOSOWANE W DOKUMENCIE I NA URZĄDZENIU

-  Ostrzeżenie ogólne
-  Zagrożenie porażeniem prądem
-  Zagrożenie dla oczu
-  Ryzyko przegrzania
-  Zakaz czynności

### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

-  Urządzenie przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.
-  Nie patrzeć bezpośrednio w diody LED podczas pracy.
-  Nie stosować na: uszkodzoną skórę, rany, miejsca objęte stanem zapalnym, nowotwory skóry.
-  Nie używać: podczas snu, w wilgotnym środowisku, pod ubraniem zatrzymującym ciepło.
-  Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, obudowy lub panelu LED.
-  Zabrania się samodzielnych napraw lub modyfikacji.

### INSTALACJA I URUCHOMIENIE

1. Sprawdzić stan urządzenia przed użyciem.
2. Podłączyć zasilanie zgodnie z parametrami.
3. Założyć pas na wybraną część ciała.
4. Uruchomić tryb pracy sterownikiem.

### ZASADY UŻYTKOWANIA

- Zalecany czas sesji: 10–25 minut (typowe dla urządzeń tej klasy)
- Stosować maksymalnie 3-4 razy w tygodniu.
- W przypadku pieczenia lub bólu przerwać używanie.
- Nie przekraczać maksymalnej intensywności ustawionej przez producenta.

### KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Nie zanurzać w wodzie.
- Czyścić miękką ściereczką.
- Nie stosować chemicznych środków czyszczących.
- Wszelkie czynności konserwacyjne i czyszczące należy wykonywać po wyłączeniu urządzenia, odłączeniu go od zasilania i całkowitym ostygnięciu.
- Regularnie kontrolować stan przewodów, obudowy oraz elementów montażowych.

### POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- W przypadku porażenia prądem natychmiast odłączyć zasilanie i wezwać pomoc medyczną.
- W przypadku przegrzania urządzenia, zapachu spalenizny, nieprawidłowej pracy: wyłączyć je, i pozostawić do ostygnięcia.
- W przypadku pożaru: stosować gaśnice przeznaczonej do urządzeń elektrycznych.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII (jeśli dotyczy modelu)

- Niektóre wersje pasów posiadają zasilanie akumulatorowe (np. powerbank ok. 3000 mAh).
- Nie demontować baterii.
- Nie przegrzewać.
- Nie przebijać.
- Nie wrzucać do ognia.
- Zużyte baterie należy oddać do punktu zbiórki.

### OZNACZENIA I INFORMACJE REGULACYJNE

- CE – zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- WEEE - zakaz wyrzucania wraz z odpadami komunalnymi.
- IP20 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych
- Rozporządzenie (UE) 2023/988 – GPSR

### UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyte urządzenie stanowi sprzęt elektryczny i elektroniczny.
- Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### WARUNKI GWARANCJI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent ani podmiot wprowadzający do obrotu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
- samodzielnych napraw lub modyfikacji,
- użytkowania w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem.

Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w konstrukcję urządzenia.