

Dane aktualne na dzień: 19-06-2026 10:54

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/pas-led-do-terapii-swiatlem-czerowonym-p-149.html>



Pas LED do terapii światłem czerowonym

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Cena poprzednia	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	RED_YD002
Kod EAN	5905629887016

Opis produktu



NOWOŚĆ! Urządzenia do
terapii światłem LED!
Łączymy **technologię** z **holistycznym podejściem**
do zdrowia na lata.



PEŁNA GWARANCJA · SERWIS NA TERENIE CAŁEJ POLSKI · NAJLEPSZEJ JAKOŚCI URZĄDZENIA · CERTYFIKATY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Dlaczego warto wybrać pas LED YD002?




Pas LED do terapii światłem czerwonym i podczerwonym YD002 - profesjonalna regeneracja mięśni i stawów

Pas LED YD002 wykorzystuje technologię fotobiomodulacji, by wspierać regenerację mięśni, stawów i skóry. Wyposażony w **120 diod dual-chip (660 nm + 850 nm)**, działa jednocześnie na powierzchniowe i głębokie warstwy tkanek, redukując stany zapalne i przyspieszając procesy naprawcze.

Dzięki wysokiej mocy naświetlania (**>100 mW/cm²**) oraz proporcji widma 1:2, urządzenie zapewnia głęboką penetrację struktur mięśniowo-stawowych. Skutecznie stymuluje komórki do odnowy i poprawia mikrokrażenie, co jest kluczowe przy przeciążeniach i po intensywnym wysiłku.

Elastyczna konstrukcja pozwala na idealne dopasowanie pasa do ciała, a zasilanie sieciowe lub z powerbanku gwarantuje pełną mobilność. Obsługa jest intuicyjna - jeden przycisk pozwala szybko dopasować tryb pracy do aktualnych potrzeb terapeutycznych



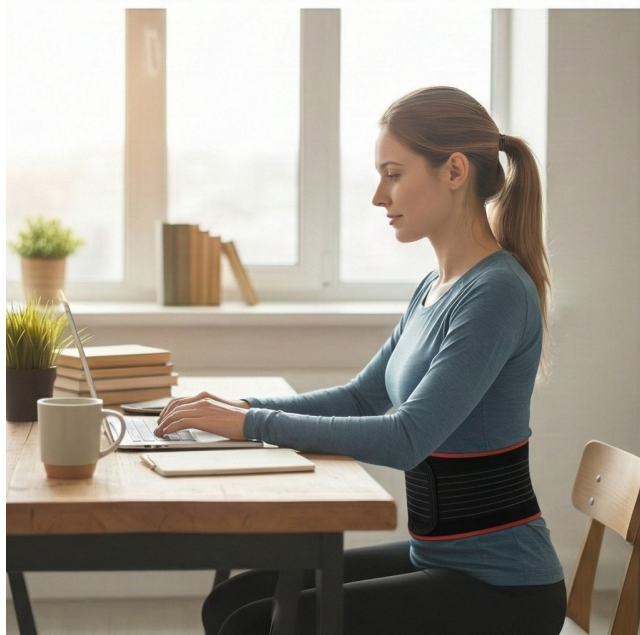

Komfort i mobilność

Pas LED YD002 został zaprojektowany z myślą o pełnym komforcie w terapii i treningu. Wykonany z **miękkiego, elastycznego materiału**, idealnie dopasowuje się do ciała, zapewniając równomierną ekspozycję na światło bez zbędnego ucisku – co jest kluczowe podczas dłuższych sesji regeneracyjnych.

Dzięki **regulowanym paskom**, urządzenie można precyzyjnie zamocować na dowolnej partii ciała (np. kolanie, barku czy odcinku lędźwiowym). Stabilne mocowanie eliminuje konieczność trzymania pasa w dłoniach, co znacząco podnosi wygodę użytkowania w rehabilitacji i sporcie.

Możliwość **zasilania sieciowego lub z powerbanku** sprawia, że pas jest niezwykle mobilny. Możesz go używać w domu, na siłowni czy w podróży, łatwo włączając terapię światłem do swojej codziennej rutyny, bez potrzeby korzystania z dużych, stacjonarnych systemów.

Prosta obsługa - inteligentne tryby

Krótkie naciśnięcie przycisku:

- ✓ Wszystkie diody (660 + 850 nm) włączone
- ✓ Tylko czerwone (660 nm)
- ✓ Tylko NIR (850 nm)
- ✓ Wyłączone

Długie naciśnięcie (3 s):

- ✓ Wszystkie diody w trybie pulsacyjnym
- ✓ Tylko czerwone w trybie pulsacyjnym
- ✓ Tylko NIR w trybie pulsacyjnym
- ✓ Wyłączone

Podłączenie przewodów jest intuicyjne; jeśli korzystasz z aplikacji, wygodnie zmienisz tryb i intensywność oraz ustawisz czas zabiegu.





WZROST PRODUKCJI ATP · POPRAWA SKÓRY · BEZPIECZEŃSTWO TERAPII · PRZYSPIESZENIE REGENERACJI · WZROST ENERGII

Informacje dodatkowe

Zestaw zawiera

- Pas LED YD002
- Adapter sieciowy
- Kabel zasilający
- Przewód łączący
- Paski mocujące
- Instrukcję obsługi

Jak stosować pas LED?

1. Podłącz do zasilania (gniazdko lub power bank $\geq 5V 2A$).
2. Załóż pas na wybrany obszar ciała - najlepszy efekt przy kontakcie bezpośrednim.
3. Wybierz tryb (ciągły/pulsacyjny), ustaw intensywność i czas (timer 20 min) - rozpocznij sesję.

Specyfikacja techniczna

Model	YD002
Diody LED	120 × 0,5 W (każda: 1 × 660 nm + 2 × 850 nm)
Długości fal	czerwone 660 nm, podczerwień 850 nm (1:2)
Moc znamionowa	60 W
Moc rzeczywista	25 W
Napięcie zasilania	5 V
Pobór prądu	2 A

Natężenie promieniowania	>100 mW/cm ² (przy 0 cm)
Wymiary	40 × 20 × 0,5 cm
Waga netto	0,58 kg
Materiał	tkanina elastyczna
Emisja EMF	0 UT
Timer	automatyczny, 20 minut
Zasilanie	adapter sieciowy (w zestawie) lub power bank (≥ 5V 2A)
Żywotność diod	>50 000 godzin
Certyfikaty	CE, RoHS, FDA
Gwarancja	2 lata

*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl



GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI · TECHNOLOGIA KLASY PREMIUM