

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/lozko-led-m7-do-terapii-czerwonym-swiatlem-p-187.html>

Łóżko LED M7 do terapii czerwonym światłem



Waga	260 kg
Wymiary	215 cm x 106 cm x 91 cm
Moc	2500 W
Liczba diod LED	13 020 szt
Fale	630, 660, 850, 940nm

Opis produktu

**NOWA ERA TERAPII
ŚWIATŁEM**

Ekskluzywne doświadczenie
regeneracji dla wymagających
klientów

ZdrowiNaLata

System terapii światłem LED M7 - nowoczesna technologia dla branży wellness

Czym jest system LED M7?

System terapii światłem **LED M7** to zaawansowane urządzenie wykorzystujące technologię fotobiomodulacji, przeznaczone dla branży wellness, medycyny estetycznej, SPA oraz fizjoterapii. Zapewnia skuteczne, nieinwazyjne zabiegi wspierające regenerację organizmu, poprawę kondycji skóry oraz ogólne samopoczucie klientów.

Najważniejsze cechy urządzenia


- aż **13 020 diod LED** o wysokiej mocy
- terapia światłem czerwonym i bliskiej podczerwieni
- możliwość regulacji parametrów (moc, długość fali, pulsacja)
- inteligentny system sterowania bezprzewodowego
- nowoczesny design z oświetleniem ambientowym RGB

Efekty terapii światłem LED

- skuteczna regeneracja komórek i odbudowa tkanek
- redukcja stanów zapalnych i napięcia mięśniowego
- poprawa krążenia krwi oraz dotlenienia tkanek
- przyspieszenie gojenia i procesów naprawczych
- widoczne odmładzanie skóry i poprawa jej kondycji

Nieźrównana moc i precyzja

Seria M7 została wyposażona w aż **13 020 diod LED EPISTAR®** o **wysokiej intensywności**, zapewniających optymalną moc terapeutyczną na poziomie **129 mW/cm²**. Zastosowanie akrylu Lucite® o 99% przepuszczalności światła gwarantuje maksymalne dostarczenie energii do tkanek, co przekłada się na lepsze i szybsze efekty terapii.

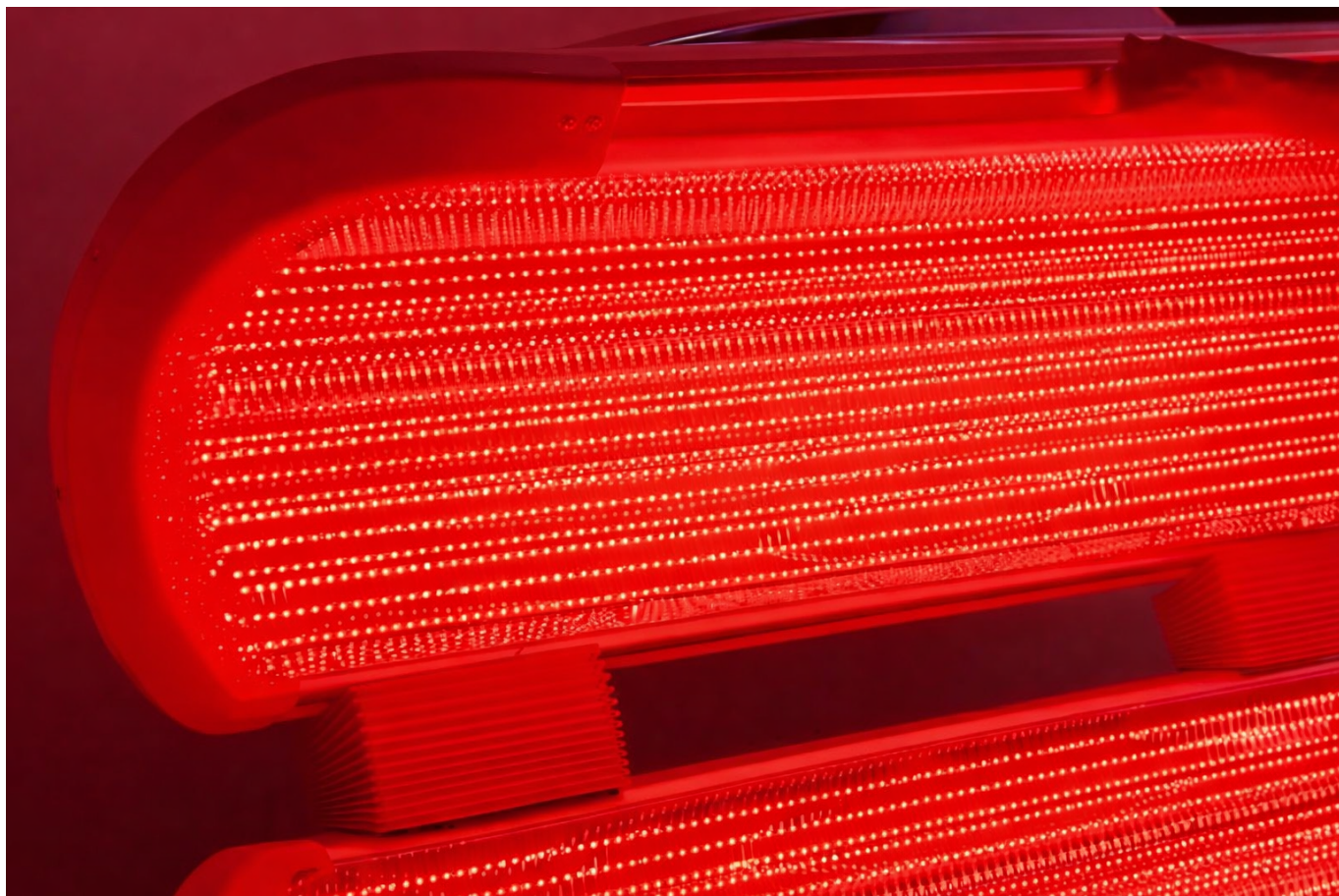



Inteligentne i precyzyjne sterowanie

Urządzenie umożliwia pełną kontrolę nad parametrami zabiegu, pozwalając na tworzenie indywidualnych protokołów terapeutycznych.

- regulacja intensywności i długości fal
- kontrola trybu pulsacji
- możliwość wyboru programów automatycznych lub ustawień manualnych

Dodatkowo zoptymalizowany kąt wiązki światła (**30°**) zapewnia precyzyjne skierowanie energii, minimalizując straty i maksymalizując absorpcję.





Technologia stworzona dla luksusu i trwałości

Nowoczesna konstrukcja w kształcie „Moon Shape” tworzy wyjątkowe, immersyjne doświadczenie dla klienta. Solidna rama wykonana z aluminium i stali zapewnia stabilność oraz wytrzymałość (do 180 kg obciążenia).

Wbudowane głośniki Bluetooth oraz ambientowe oświetlenie RGB dodatkowo podnoszą komfort i tworzą **kompleksowe doświadczenie sensoryczne klasy premium.**



Dlaczego warto wybrać terapię światłem LED?

Terapia światłem LED to bezpieczna i skuteczna metoda wspierająca naturalne procesy regeneracyjne organizmu. Jest bezbolesna, nieinwazyjna i może być stosowana jako uzupełnienie innych zabiegów estetycznych oraz terapeutycznych.



Zainwestuj w rozwój swojego biznesu

Jeśli rozważasz zakup profesjonalnego łóżka do terapii światłem LED i chcesz wprowadzić nowoczesne rozwiązania do swojej oferty, skontaktuj się z nami. Doradzimy najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twojego biznesu oraz pomożemy w doborze odpowiedniej konfiguracji urządzenia.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu:

- dobierzesz parametry urządzenia dopasowane do Twojej oferty
- wdrożysz nowe usługi w sposób szybki i efektywny
- zwiększysz konkurencyjność swojego biznesu
- maksymalnie wykorzystasz potencjał inwestycji

Kompleksowe wsparcie na każdym etapie:

- zapewnimy indywidualne doradztwo dopasowane do Twojego biznesu
- pomożemy dobrać optymalną konfigurację urządzenia
- przeprowadzimy Cię przez proces wdrożenia krok po kroku
- wesprzemy w efektywnym wykorzystaniu technologii w praktyce

Zainteresowany?

Jeżeli jesteś zainteresowany wprowadzeniem łóżka LED M7 do swojego gabinetu:

 **Skontaktuj się z nami i zapytaj o indywidualną wycenę dopasowaną do Twojego biznesu.**

 Tel: [+48 533-101-668](tel:+48533101668)

 E-mail: kontakt@sklep.zdrowinalata.pl

Specyfikacja techniczna

Model

M7

Diody LED

13 020 szt.

Długości fal

630, 660, 850, 940nm

Całkowita Moc

2500 W

Rodzaj diody

EPISTAR 0,2 W, Single Chip

Kąt świecenia

120°

Napięcie

220V|380V

Zasilanie

Prąd stały

Zakres temperatury pracy

-10°~45°C

Limit wagowy

150 kg

Waga netto

260 kg

Wymiary

215 cm*106 cm*91 cm / Wysokość tunelu: 37 cm

Certyfikaty

ISO 9001, FDA registered, CE

Gwarancja

3 lata

FAQ

Jaki jest zalecany protokół użytkowania?

Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy początkową fazę 2–3 sesji tygodniowo.

Po pierwszym miesiącu częstotliwość można zmniejszyć do 1–2 razy w miesiącu w celu podtrzymania efektów.

Jak długo trwa jedna sesja?

Standardowa sesja trwa zazwyczaj od 10 do 20 minut, w zależności od ustawień i celu terapii.

Czy istnieją przeciwwskazania do tej terapii?

- kobiet w ciąży
- osób z nadciśnieniem

-
- osób z chorobami serca
 - osób z nowotworami złośliwymi
 - osób z nadwrażliwością na światło

Jakie efekty można uzyskać dzięki terapii?

- regenerację mięśni i tkanek
- poprawę kondycji skóry
- redukcję bólu i stanów zapalnych
- poprawę jakości snu
- zwiększenie poziomu energii

Dla jakich branż jest to rozwiązanie?

- SPA i wellness
- kliniki medycyny estetycznej
- fizjoterapia i rehabilitacja
- siłownie i centra sportowe
- biohacking i longevity

*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).
Producent: REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, luke@reddotled.com
Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl
Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl