

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/inhalator-wodoru-olv-900a-okulary-wodorowe-ca-e10-p-62.html>



Inhalator wodoru OLV-900A + okulary wodorowe CA-E10

Cena brutto	14 499,00 zł
Cena netto	11 787,80 zł
Cena poprzednia	14 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	OLV-900A

Opis produktu

ZESTAW INHALATOR WODORU OLV-900A + OKULARY WODOROWE CA-E10

Zestaw Inhalator Wodoru OLV-900A, Okulary Wodorowe CA-E10 to możliwość zakupu obu urządzeń w atrakcyjnym cenowo pakiecie.

Inhalator wodoru OLV-900A, zapewniający wydajność na poziomie 900 ml/min wodoru i tlenu, 600 ml/min wodoru i 300 ml/min tlenu Zastosowanie technologii SPE/PEM sprawia, że wytwarzany jest czysty wodór o bezpiecznym dla człowieka stężeniu. OLV-900A idealnie sprawdzi się w przestrzeni gabinetowej jak i domowej. Dodatkowo inhalator wyposażony jest w **OKULARY WODOROWE**.



INHALATORY
WODORU.PL



OLV-300A



OLV-900A

Produkcja wodoru	TAK	TAK
Produkcja Gazu Browna	NIE	TAK
Wydajność	300 ml wodoru na minutę	600 ml wodoru lub 900 ml tlenu i wodoru na minutę
Technologia	SPE/PEM	SPE/PEM
Wytwarzanie wody wodorowej	TAK	TAK
Liczba osób mogących się jednocześnie inhalować	2	2 (przy zakupie akcesoriów)
Czystość wodoru	99,9%	99,9%
Okulary wodorowe w zestawie	TAK	TAK
Żywotność membrany	10 000 godzin	10 000 godzin

Okulary wodorowe to urządzenie stworzone przy współpracy z najlepszymi specjalistami z zakresu okulistyki. Dzięki ich wskazówkom, jak i niezależnym badaniom, udało się opracować sprzęt spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających pacjentów. Połączenie klasycznych i innowacyjnych metod dbania o oczy sprawia że, terapia ta jest wyjątkowo skuteczna i całkowicie bezpieczna. Okulary wodorowe są wyposażone w dwukanałowe i trójwymiarowe rozprowadzanie pary, dzięki czemu holistycznie wpływają na organizm człowieka.

Dlaczego warto kupić inhalator wodoru HIM-17!

Wydajność i bezpieczeństwo: OLV-900A jest jednym z najbardziej wydajnych urządzeń w naszej ofercie. Dzięki produkcji do 900 ml wodoru i tlenu na minutę, zapewnia skuteczną terapię wodorem molekularnym

Możliwość produkowania mieszanki wodoru i tlenu: OLV-900A pozwala na wytwarzanie mieszanki tzw. Gazu Browna, co rozszerza jego możliwości terapeutyczne.

Skuteczna ochrona antyoksydacyjna: Wodór molekularny działa jako silny antyoksydant pomagając w neutralizacji wolnych rodników i chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym.

Wsparcie w walce z chorobami przewlekłymi: Terapia wodorem molekularnym może stanowić wsparcie w walce z różnymi chorobami przewlekłymi

Terapia dla dwóch osób jednocześnie: Dzięki wydajności i dwóm wyjściom, OLV-900A umożliwia stosowanie terapii wodorowej przez dwie osoby jednocześnie, przy zakupie dodatkowych akcesoriów.

Wysoka żywotność: OLV-900A może pracować aż do 10 000 godzin, co gwarantuje jego długotrwałe i niezawodne użytkowanie.

Monitorowanie jakości wody: Detekcja jakości wody TDS monitoruje nieprawidłowości, takie jak brak wody czy przegrzanie, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.



Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta Inhalatorów Cawolo i świadczy gwarancję, serwis oraz wsparcie techniczne.



REGENERACJA
PO COVID-19



PROFILAKTYKA
NOWOTWOROWA



REDUKCJA
CHRONICZNEGO
ZMĘCZENIA



LECZENIE
CHOROÓB OCZU



POPRAWA
PAMIĘCI
I KONCENTRACJI



NIWELOWANIE
OBJAWÓW
ALERGII I ASTMY



WSPARCIE
DLA SKÓRY




WSPARCIE PRZY
CHOROBY PARKINSONA
I ALZHEIMERA

Inhalacje wodorem molekularnym, ze względu na dużą skuteczność i całkowity brak działań niepożądanych, mają potencjał do stosowania w leczeniu wielu chorób i schorzeń. Dodatkowo, poprzez regulację ekspresji genów pozytywnie wpływają na cały organizm, a dostarczanie wodoru do organizmu jest najlepszym antyoksydantem. Inhalator Wodoru OLV-900A, idealnie sprawdzi się w domu. Urządzenie posiada certyfikat CE SGS, jest proste w obsłudze i bezpieczne do stosowania w warunkach domowych.



WYDAJNOŚĆ DO
900ML/MIN

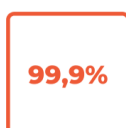

CZYSTOŚĆ
WODORU 99,9%



ZASTOSOWANIE
TECHNOLOGII
SPE I PEM



TRWAŁOŚĆ NA
POZIOMIE 10 000
GODZIN PRACY

Zalety OLV-900A:

- Wydajność **do 900ml/min, 600 ml/min wodoru i 300 ml/min tlenu**;
- Membrana Wymiany Protonów DuPont 117 oraz zastosowanie technologii SPE/PEM, wraz z tytanowo platynową powłoką **gwarantują produkcję najczystszej wodoru** (99,9%);
- Membrana zapewnia sprawność urządzenia na poziomie **10000 godzin**;
- Możliwość korzystania **2 osób jednocześnie, przy zakupie dodatkowych akcesoriów**;
- **Urządzenie idealne** do użytku domowego i profesjonalnego;
- Poziom stężenia wodoru utrzymuje się na przystosowanym dla człowieka poziomie, dlatego **korzystanie z urządzenia jest w pełni bezpieczne**;
- Urządzenie zostało wyposażone w **systemy monitorowania jakości i poziomu wody**, co chroni je przed przypadkowym uszkodzeniem;
- Inhalator **wytwarza wodę wodorową** i posiada odpowiednie akcesorium do jej produkcji;
- W zestawie znajduje się **komplet akcesoriów do prowadzenia inhalacji oraz okulary wodorowe**.

Zalety Okularów Wodorowych CA-E10:

- Zapewniają możliwość **regulacji temperatury pary**;
- Są **kompatybilne z Inhalatorami Wodoru**;
- Ładowanie przy pomocy wejścia **USB Typ-C**;
- **Trójwymiarowe** rozpylanie aerozolu;
- **Dwukanałowe** rozpraszanie pary;
- Posiadają funkcję **atomizacji w nanometrach**;
- Zapewniają **pełną przyswajalność wodoru**;
- Mają **niewielki rozmiar**.



H₂ INHALATORY
WODORU.PL

Zasilanie	220V/50Hz	Metoda elektrolizy	SPE (stałe elektrolity polimerowe) + PEM (membrana wymiany protonów)
Moc	150W	Membrana	Membrana protonowa DuPont + warstwa wierzchnia z tytanowo platynowej powłoki
Wydajność	do 900ml/min - 600ml/min wodoru lub/oraz do 300ml/min tlenu	Wymiary	300x255x360mm
Pojemność	2000ml na wodę destylowaną	Waga	12kg
Obudowa	Stal nierdzewna malowana proszkowo	Gwarancja	24 miesiące (klient końcowy), 12 miesięcy (B2B)




OLV-900A generuje czysty wodór o stężeniu 99.9% z szybkością 300ml na minutę. Dzięki rozpuszczającemu gaz prętowi, urządzenie wytwarza także wodę wodorową.



Inhalatory wodoru to urządzenia wyposażone w membrany PEM, które w procesie elektrolizy produkują czysty wodór (bez mieszania z tlenem). Dzięki połączeniu technologii wytwarzania SPE (stałych elektrolitów polimerowych) w podwójnej komorze PEM (membrany wymiany protonów) uzyskuje się czysty wodór, bez jednoczesnego wytwarzania szkodliwych gazów takich jak chlor czy ozon. W procesie inhalacji, wodór dostarczany jest do organizmu pacjenta poprzez kaniulę lub maskę.

ELEKTROLIZER WODORU W TECHNOLOGII SPE/PEM

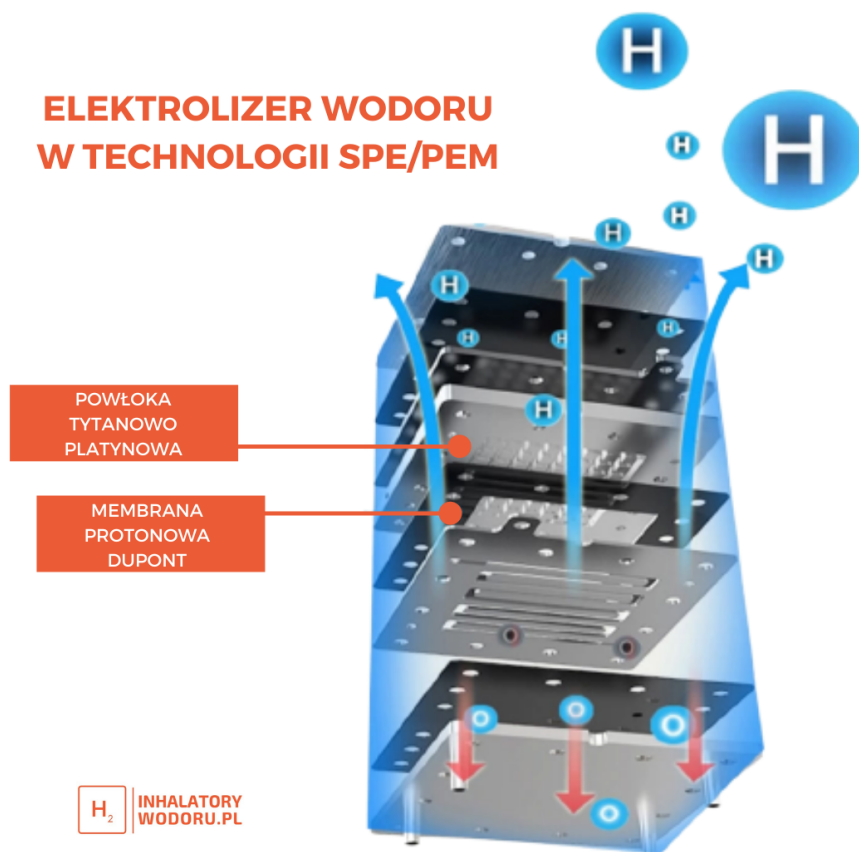

Wodór molekularny to nietoksyczny, bezbarwny i bezwonny gaz naturalnie występujący w przyrodzie. Choć znany jest od kilkuset lat, dopiero w 2007 r. zespół dr Shigeo Ohta skazał że ma on potencjał jako skuteczny przeciwutleniacz w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych. Od wspomnianego momentu powstało ponad 1200 prac badawczych, udowadniających jego skuteczność. W listopadzie 2016 r. Inhalacje Wodorem zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w Japonii jako zaawansowana terapia medyczna.

Inhalatory wodoru stosuje się między innymi w leczeniu COVID-19, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób płuc, a nawet mózgu. Urządzenie w znaczącym stopniu hamuje także proces namnażania się komórek nowotworowych. OLV-900A pomaga również z problemami codziennego funkcjonowania, takimi jak słaba odporność, trudności z zachowaniem koncentracji i pamięcią, zmęczenie czy stres.

INHALATOR WODORU MOLEKULARNEGO



**MOŻLIWOŚĆ INHALACJI
CZYSTYM WODOREM**

*Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym.

Dowiedz się więcej o wodoroterapii:

Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.



