

Dane aktualne na dzień: 19-05-2026 11:04

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/wypozyczenie-inhalator-wodoru-him-19-p-46.html>



## Wypożyczenie inhalator wodoru HIM-19

Cena brutto	<b>2 000,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 626,02 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>USL_WYP_HIM19</b>

### Opis produktu

**Urządzenie pozwala generować aż 1000 ml wodoru lub 1500 ml mieszanki wodoru i tlenu (Gaz Browna).**

## UWAGA!

W celu ustalenia warunków wypożyczenia oraz dostępności urządzenia, prosimy o kontakt przed dokonaniem rezerwacji.

MAIL: [KONTAKT@INHALATORYWODORU.PL](mailto:KONTAKT@INHALATORYWODORU.PL) TELEFON: 533 101 668

Zastosowanie technologii SPE/PEM sprawia, że wytwarzany jest czysty wodór. Wydajność urządzenia na poziomie 1000 ml wodoru molekularnego na minutę i 500 ml tlenu na minutę, sprawia że urządzenie nie ma sobie równych i zapewni najwyższą skuteczność terapii.



H<sub>2</sub>

INHALATORY  
WODORU.PL

Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem inhalatorów i świadczy gwarancję, serwis oraz wsparcie techniczne.



REGENERACJA  
PO COVID-19



PROFILAKTYKA  
NOWOTWOROWA



REDUKCJA  
CHRONICZNEGO  
ZMĘCZENIA



LECZENIE  
CHOROBY OCZU



POPRAWA  
PAMIĘCI  
I KONCENTRACJI



NIWELOWANIE  
OBJAWÓW  
ALERGII I ASTMY



WSPARCIE  
DLA SKÓRY



WSPARCIE PRZY  
CHOROBY PARKINSONA  
I ALZHEIMERA

Inhalacje wodorem molekularnym należą do jednych z najbardziej innowacyjnych terapii na świecie. Jako największe zalety wodoroterapii wymieniamy bezpieczeństwo i szerokie spektrum zastosowań. HIM-19 to wydajne urządzenie, które posiada certyfikat CE SGS, a jego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi.

## PORÓWNIANIE Profesjonalne Inhalatory Wodoru

	 <b>HIM-19</b>	 <b>OLV</b>	 <b>OLV-3000 PL/ANG</b>	 <b>OLV-4200</b>	 <b>OLV-HYD</b>
<b>H<sub>2</sub> INHALATORY WODORU.PL</b>					
Wymiary	352x372x379 mm	250x365x420 mm	350x280x280 mm	570x360x330 mm	205x 438x350 mm
Waga	10,6 kg	13 kg	15 kg	18 kg	14,5 kg
Wydajność					
1000 ml wodoru lub	✓	✓	✗	✗	✓
1500 ml tlenu i wodoru	✓	✓	✗	✗	✓
1200 ml wodoru lub	✗	✓	✗	✗	✓
1800 ml tlenu i wodoru	✗	✓	✗	✗	✓
2000 ml wodoru lub	✓	✗	✓	✗	✓
3000 ml tlenu i wodoru	✓	✗	✓	✗	✓
2800 ml wodoru lub	✗	✗	✗	✓	✗
4200 ml tlenu i wodoru	✗	✗	✗	✓	✗
Wielowiatrakowy system chłodzenia	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
Kółka	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Moc znamionowa	<300 W	<260 W	<480 W	<480 W	<750 W
Technologia	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM
Inhalacje w tym samym czasie	2 osoby	2 osoby	2 osoby	4 osoby	4 osoby
Okulary wodorowe	Opcja	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Produkcja wody wodorowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Detekcja jakości wody	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Czystość wodoru	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Dotykowy ekran	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK



#### Zalety HIM-19:

- Najbardziej wydajne i jednocześnie bezpieczne urządzenie – produkuje **do 1000 ml wodoru lub 1500 ml tlenu i wodoru na minutę**
- Możliwość produkowania **mieszanki wodoru i tlenu**, tzw. Gazu Browna;
- **Zintegrowane z obudową zbiorniki kondensacyjne**, ułatwiają transport oraz korzystanie z urządzenia;
- Umożliwia stosowanie terapii przez **dwie osoby równocześnie**;
- Membrana Wymiany Protonów **DuPont 117**, wraz z tytanowo platynową powłoką zapewniają maksymalną wydajność urządzenia;
- Wysoka żywotność, aż do **10 000 godzin** pracy;
- Technologia **SPE oraz PEM** gwarantują wytwarzanie wodoru czystego wodoru (99,9%);
- Detekcja jakości wody **TDS** monitoruje nieprawidłowości, w tym o braku wody, czy przegrzani;
- **Dotykowy ekran** w połączeniu z nowoczesnym designem, zapewniają łatwość obsługi oraz wskazują szczegółowe parametry;
- Urządzenie generuje dźwięk o natężeniu **do 40dB**, co gwarantuje cichą pracę;
- Przeznaczony dla osób, które chcą posiadać najbardziej wydajne urządzenie lub wykorzystywać je do **prowadzenia zabiegów wodoroterapii w gabinetach**.



CICHA  
PRACA



SPRAWDZI SIĘ  
W GABINETACH  
WODOTERAPII



PRODUKUJE  
MIESZANKĘ  
WODORU I TLENU



MOŻLIWOŚĆ  
UŻYTKOWANIA PRZEZ  
DWIE OSOBY

<b>Nazwa produktu</b>	Inhalator wodorowy	<b>Pojemność zbiornika na wodę</b>	2L	<b>Funkcja</b>	Inhalacje wodorowe
<b>Model</b>	HIM-19	<b>Czystość wodoru</b>	99,9%	<b>Moc znamionowa</b>	<300 W
<b>Wymiary</b>	352×372×379 mm	<b>Napięcie zasilania</b>	220V / 50/60 Hz	<b>Wytwarzanie wodoru</b>	1000 ml wodoru lub 1500 ml mieszanki wodoru i tlenu (Gazu Browna)
<b>Waga netto</b>	10,6 kg	<b>Wytwarzane ciśnienie</b>	200 kPa		


**Urządzenie generuje czysty wodór o stężeniu 99.9% z szybkością 1000ml na minutę, jak i mieszanke wodoru i tlenu w stężeniu 66% - 33%. Dzięki rozpuszczającemu gaz prętowi, urządzenie wytwarza także wodę wodorową.**

**Potwierdzona wydajność urządzenia HIM-19:**


Inhalatory wodoru to urządzenia wyposażone w membrany PEM, które w procesie elektrolizy produkują czysty wodór (bez mieszania z tlenem). Dzięki połączeniu technologii wytwarzania SPE (stałych elektrolitów polimerowych) w podwójnej komorze PEM (membrany wymiany protonów) uzyskuje się czysty wodór, bez jednoczesnego wytwarzania szkodliwych gazów takich jak chlor czy ozon. W procesie inhalacji, wodór dostarczany jest do organizmu pacjenta poprzez kaniulę lub maskę.




## ELEKTROLIZER WODORU W TECHNOLOGII SPE/PEM

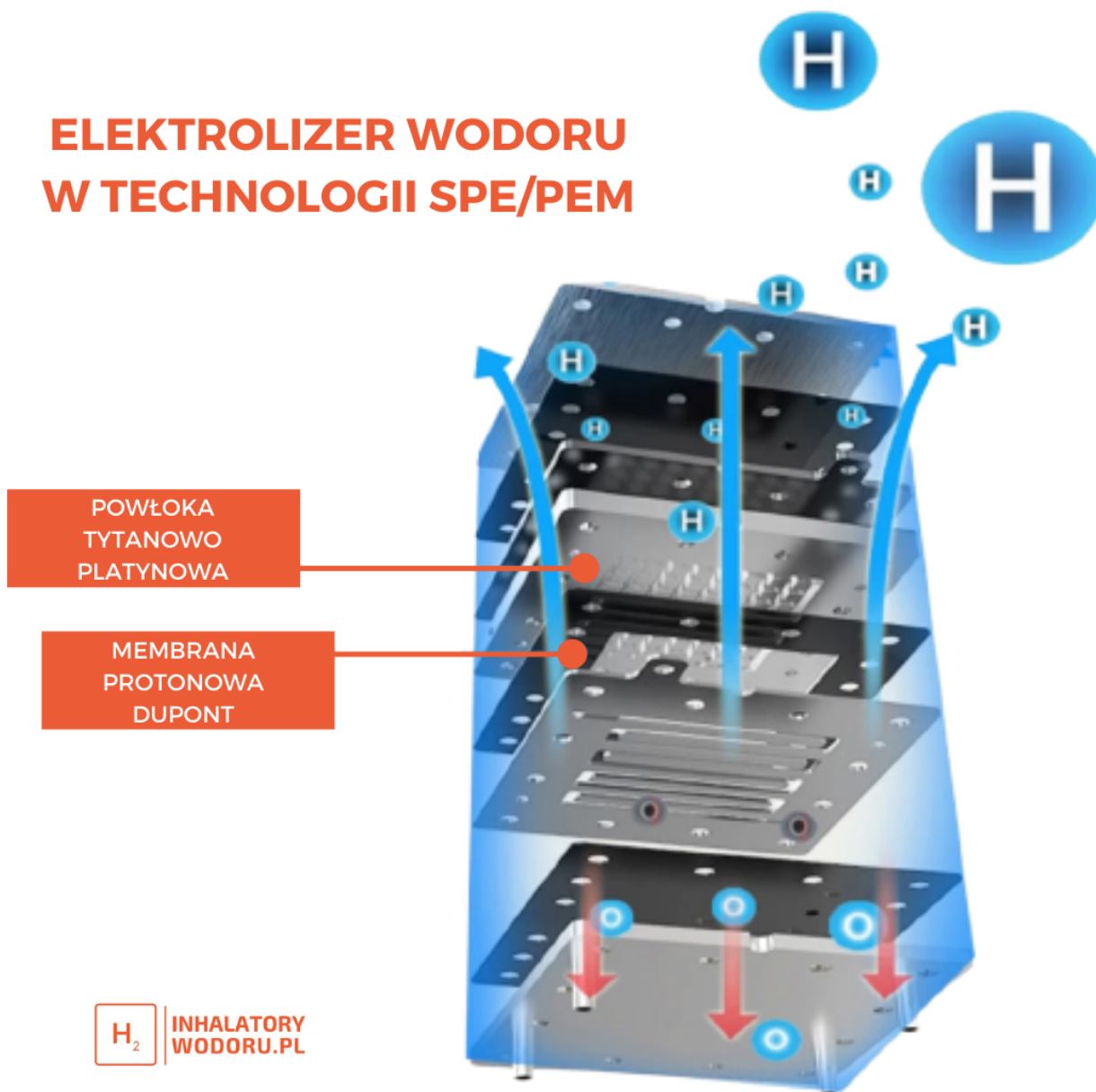

Wodór molekularny to nietoksyczny, bezbarwny i bezwonny gaz naturalnie występujący w przyrodzie. Choć znany jest od kilkuset lat, dopiero w 2007 r. zespół dr Shigeo Ohta skazał że ma on potencjał jako skuteczny przeciwutleniacz w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych. Od wspomnianego momentu powstało ponad 1200 prac badawczych, udowadniających jego skuteczność. W listopadzie 2016 r. Inhalacje Wodorem zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w Japonii jako zaawansowana terapia medyczna.

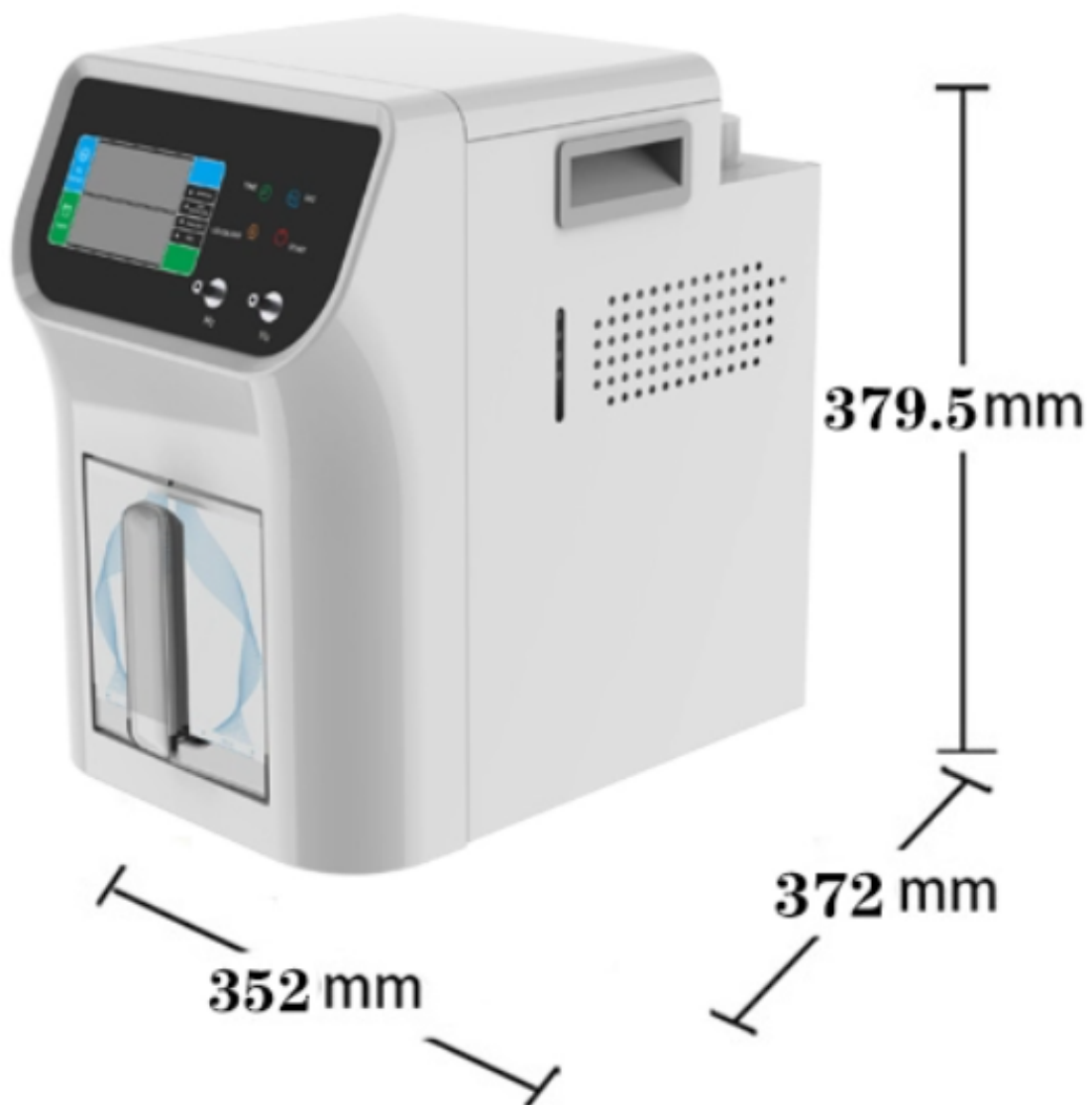

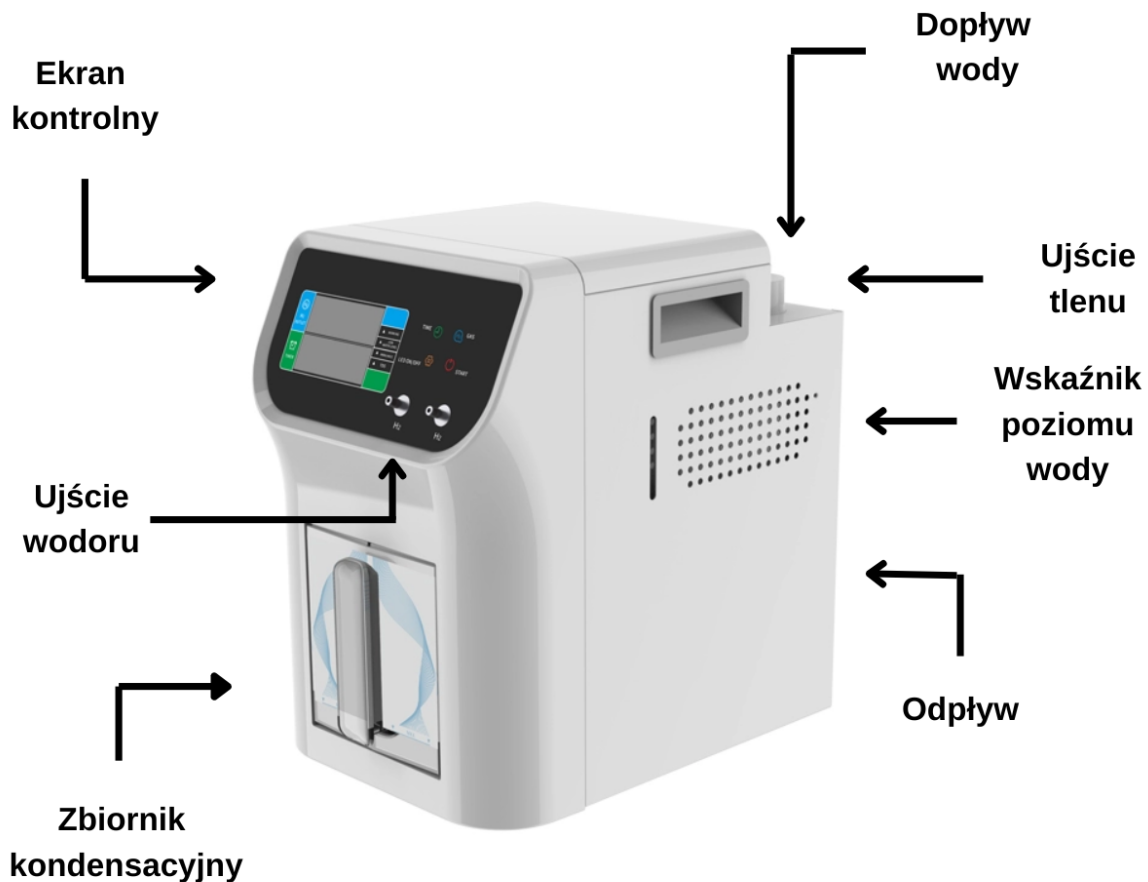

Inhalatory wodoru stosuje się między innymi w leczeniu COVID-19, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób płuc, a nawet mózgu. Urządzenie w znaczącym stopniu hamuje także proces namnażania się komórek nowotworowych. HIM-19 pomaga również z problemami codziennego funkcjonowania, takimi jak słaba odporność, trudności z zachowaniem koncentracji i pamięcią, zmęczenie, czy stres.

**Dowiedz się więcej o wodoroterapii:**

**Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.**

\*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

**Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa**  
Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).



**Producent:** GUANGDONG CAWOLO HYDROGEN TECHNOLOGY CO., LTD.  
Address: 5TH FLOOR, BUILDING F3, NEW LIGHT INDUSTRIAL BASE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA Postal code: 528000, sky@cawolo.com

**Osoba odpowiedzialna na terenie UE:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl  
**Importer:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Okres wypożyczenia:** 14 dni , 30 dni (+ 500,00 zł )